


ガードアイ・クイックビームセンサー ご利用イメージ


(1/2)

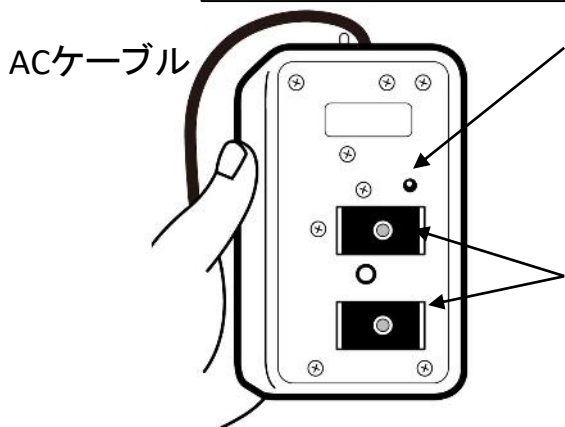

音設定ボタン
先の細いものでカチッというまで押し、
離すとその音で設定できます。

マグネット
鉄製のベッドであればそのまま取り付
けられます。鉄製でない場合、付属の
鉄製のプレート2枚(両面テープ付き)
をご利用下さい。

※センサー本体を移動や取り外す際は
移動しながら行ってください。

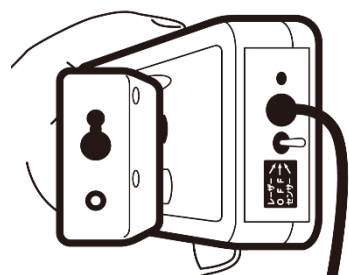

クイックビームセンサー

ACコンセントに差し込んで 使用します。
コードの長さが足りない場合は市販の延
長コードをご使用ください。

≒50m
クイック



警報機


単3電池3本使用します。
(ACアダプター別売)

※本機器は生命救助用としては
お使いになれません。

詳細

重要:

グリーンとオレンジのランプが有り、センサーの待機状態はグリーンランプが点灯、センサー反応時、グリーンとオレンジランプの両方が点灯します。

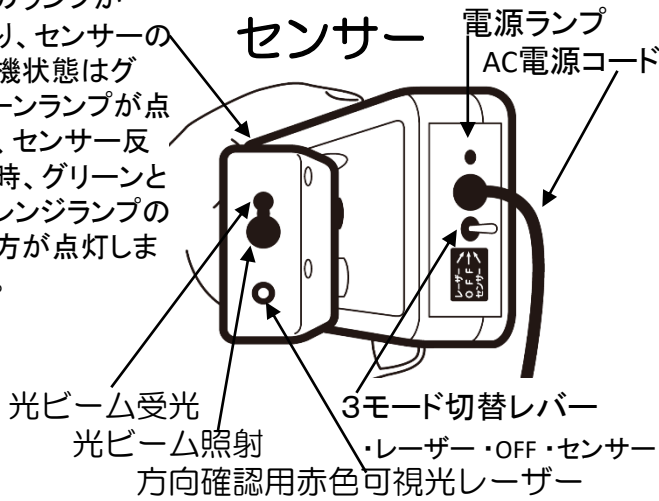

センサーの切り替えレバーを“OFF”の位置にします。

センサーの電源プラグをACコンセントに差し込みます。

警報機に単3電池3本入れます。スライドレバーを♪/💣にします。

センサー背面の6mmの穴に赤い色のメロディ変更ボタンを先の細いものでカチッと音がするまで押し、すぐに離します。※出荷時のメロディは♪ピンポンピンポン♪にしています。

警報機からメロディー鳴動と光が点滅します。

メロディ変更ボタンを押し、希望のメロディーを選択後、センサー切り替えレバーを“センサー”に移動し、センサー本体の緑色の電源ランプが点灯するのを確認します。

センサーの頭の部分がオレンジ色になった瞬間にメロディーと光が鳴動点滅しメロディーが自動で停止すると光点滅も自動で停止します。

警報機




※電源は常にON状態を推奨

センサー背面

メロディー変更ボタン

マグネット

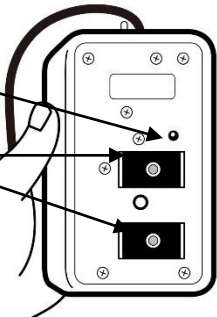

重要:

鉄製の板から本体を外す際は、ずらしながら行ってください。


本体を引っ張るとマグネットが取れる場合があります。

センサーをベッドの鉄製のハリにマグネットで固定します。※ベッドが木製の場合には付属のプレートをお使い下さい。

センサーの切替レバーを“レーザー”に移動し、センサー可動部分を、指でつまんで、利用者の足がベッドから出た位置に合わせます。次に切り替えレバーを“センサー”に移動します。この時、緑色のLEDが点灯していることを確認してください。※緑色のLEDは、光ビームの長さ1, 2m内に障害物がない場合に限り点灯します。

センサー正面

光ビーム(目に見えませんが)を遮断すると瞬時に警報機が鳴動します。

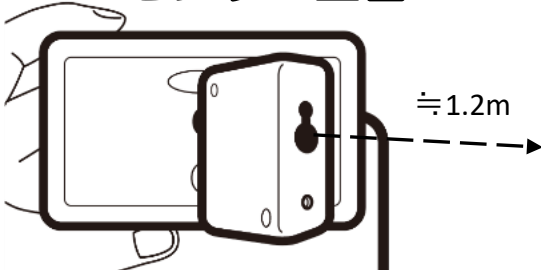

オレンジと緑色のLEDが点灯する場合は、センサーを指でつまみ、緑色LEDのみ点灯するように向きや高さを微調整してください。

手の平でセンサーの光ビームを遮断し、警報機からメロディー光が点滅すれば設定完了です。